


COMMENT REALISER LE BRANCHEMENT DE LA NUTRITION ENTERALE

Il existe 2 possibilités pour s'alimenter par voie entérale

AVEC UNE POMPE

La poche d'alimentation est accrochée à un pied à perfusion (ou positionnée dans un socle pour sac à dos) et est reliée à la sonde par une tubulure qui passe par une pompe de Nutrition. La pompe est **un régulateur de débit, cela signifie que c'est la pompe qui va réguler la vitesse**

La nutrition par pompe permet d'être plus précis sur le temps de passage de la nutrition et donc favoriser une meilleure tolérance digestive, et peut déclencher une alarme en cas de non délivrance de la nutrition.

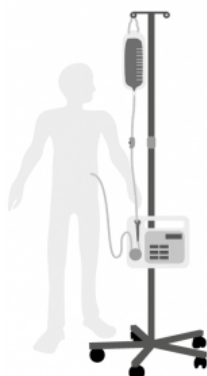

La pompe de Nutrition appartient au CHU de Lille. Elle vous est prêtée par un contrat de location auprès de l'Assurance-maladie. A la fin de votre prise en charge, il convient de restituer la pompe à l'UNAD.

En cas de non-restitution de celle-ci, un remboursement vous sera demandé.


A LA SERINGUE

La nutrition entérale est administrée à la seringue directement dans la sonde en poussant manuellement et doucement le piston de la seringue. On parle de « **bolus-seringue** ».



Comment procéder pour le branchement avec la pompe de Nutrition


Préparer poche et tubulure

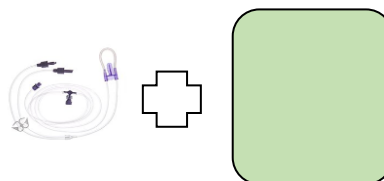

Se laver les mains



Vérifier la bonne position : debout, assis, semi-inclinée en cas de nutrition nocturne

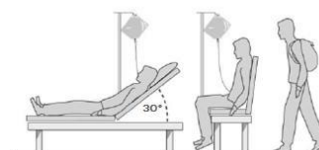

Vérifier que la sonde est fonctionnelle en la rinçant avec de l'eau à la seringue



Secouer la poche afin d'homogénéiser son contenu et vérifier son aspect

Enlever le bouchon de la poche, percuter la tubulure puis la visser sur l'embout de la poche qui sera ainsi percée



Une poche de Nutrition percée doit être utilisée dans les 24h

Suspendre la poche au pied à perfusion ou la positionner dans le sac à dos à l'emplacement prévu



Insérer la tubulure dans la pompe à l'emplacement prévu pour débiter la purge

Se reporter à la fiche d'utilisation de la pompe de nutrition, page

